

Italy • Safety



Economy M1



Features & Function

Curve Design

เบาะกว้างขนาดใหญ่ ช่วยให้ผู้ไขว้รู้สึกสบาย

Dentist Tray

ออกแบบจุดเชื่อมต่อให้พอดีกับเบาะคนไข้ มีตาว่างเครื่องมือขนาดใหญ่ มีจอแสดงผล ที่ว่างสำหรับ Triple syringe, Handpiece และที่ว่างสำรอง 2 ตำแหน่ง พร้อมแผงควบคุม ระบบการทำงานของเก้าอี้ทำฟัน



Assistant Tray

มีที่วางและสายดูดสำหรับ High power suction, Saliva ejector, Triple syringe พร้อมที่ว่างสำรอง 2 ตำแหน่ง มีตาว่างของและแผงควบคุมการทำงาน



LED Operation Light

ระบบไฟแสงสว่างแบบหลอดไฟ LED มี 6 ดวง เลือกลีแสงไฟได้ ทั้งแสงสีขาวและแสงสีส้ม ควบคุมการทำงานด้วย sensor



Headrest

สามารถปรับตำแหน่งของ เบาะรองศีรษะให้เหมาะกับ คนไข้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่



Armrest

Single armrest ที่ว่างแขนสามารถหมุน-พับเก็บได้



Treatment box

มีระบบводน้ำสำหรับใส่ น้ำสะอาด เพื่อใช้เป็นแหล่ง ง่ายน้ำกับ Handpiece



Spittoon Unit Body

อ่างน้ำป้อนปากผิวเรียบทำด้วย วัสดุเซรามิก สามารถหมุนได้ 90° มีระบบเปิด-ปิดก๊อกน้ำ พร้อมระบบเติมน้ำในแก้ว




Junction Box

สะดวกในการ ติดตั้งเก้าอี้ทำฟัน



Foot Control

ใช้งานปรับระดับเก้าอี้ง่าย ควบคุม การทำงานของด้านกรอ และสามารถเลือกให้หัวกรอทำงาน อย่างเดียว หรือทำงานแบบ มีน้ำร่วมด้วย

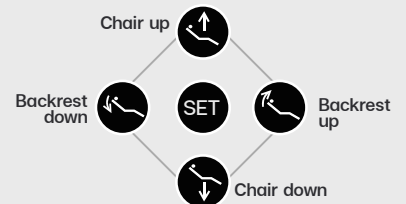

Water Cup heater On-Off



Water Cup filler On-Off



Water split On-Off



OP light On-Off



Optional

Dentist chair

ออกแบบตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomic) ปรับขึ้นลง 450 - 610 mm ปรับองศาการเอน ≥ 15°



T600 LED



T800 LED



T900 LED



Multi Functional Foot Pedal



Sewn microfiber leather



Standard Equipment & Features

Dentist Side

- ที่วางเครื่องมือเป็นแบบแขวน Hanging hose
- ช่องวางอุปกรณ์ 6 ช่อง
- สายด้ามกรอเร็ว 2 เส้น
- สายด้ามกรอช้า 1 เส้น
- สาย Triple syringe 1 เส้น
- แผงควบคุมการทำงานฝั่ง Dentist tray
- ที่ดูดฟิล์มเอกซเรย์

Assistant Side

- แผงควบคุมการทำงานและติดตั้งเครื่องมือเป็นชิ้นเดียวกัน
- ช่องวางอุปกรณ์ 5 ช่อง ที่
- สาย High power suction 1 เส้น
- สาย Saliva ejector 1 เส้น
- สาย Triple syringe 1 เส้น
- แผงควบคุมการทำงานฝั่ง Assistant tray

Spitton Unit Body

- อ่างน้ำบ้วนปากวัสดุเซรามิก ถอดออกได้
- ปรับอ่างบ้วนปากหมุนได้ 90°
- ควบคุมเปิด-ปิดน้ำ ด้วยปุ่มกด สำหรับน้ำในอ่างและน้ำในแก้ว
- มีระบบตั้งค่าปริมาณน้ำในแก้ว
- ที่กรองวัสดุก่อนลงท่อน้ำทิ้ง
- ท่อน้ำสำหรับบรรจุน้ำกลั่นสะอาด 1 ท่อ

LED Operating Light

- สวิตช์เปิด-ปิด และปรับโหมดที่ตัวคอมไฟ
- ให้แสงสว่างได้ 2 สี Cool light และ Warm light
- ปฏิกิริยาเปิด-ปิดไฟ และปรับระดับด้วย Sensor

Foot Control

- ควบคุมด้ามกรอและปรับตำแหน่งเก้าอี้คนไข้
- ควบคุมการทำงานของด้ามกรอได้ทั้งแบบมีน้ำและไม่มีน้ำได้
- ควบคุมเปิด-ปิดน้ำในอ่างบ้วนปาก และเติมน้ำในแก้ว

Optional Equipment & Features

- ติดตั้งเครื่องดูดฝุ่นปูน
- ติดตั้งด้ามกรอ Electric Micromotor
- จอ LCD
- เบาะหนังเก้าอี้แบบหุ้มตะเข็บ
- คอมไฟ LED รุ่น T800 , T900
- สวิตช์เก้าอี้แบบ Multi Function

Color Guide

PU



LEATHER





ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า




Specifications

Name / Model	▶ M1
Input volage	▶ 100 - 240 VAC
Frequency	▶ 50 Hz / 60 Hz
DC motor	▶ d.c. 24 V
Power consumption	▶ 1100 VA
Safety standard	▶ GB 9706.1-2007
Patient seat elevation system	▶ Electric gear system
Seat height	▶ Min 49 cm Max 72 cm
Weight	▶ Approximately 200 kg

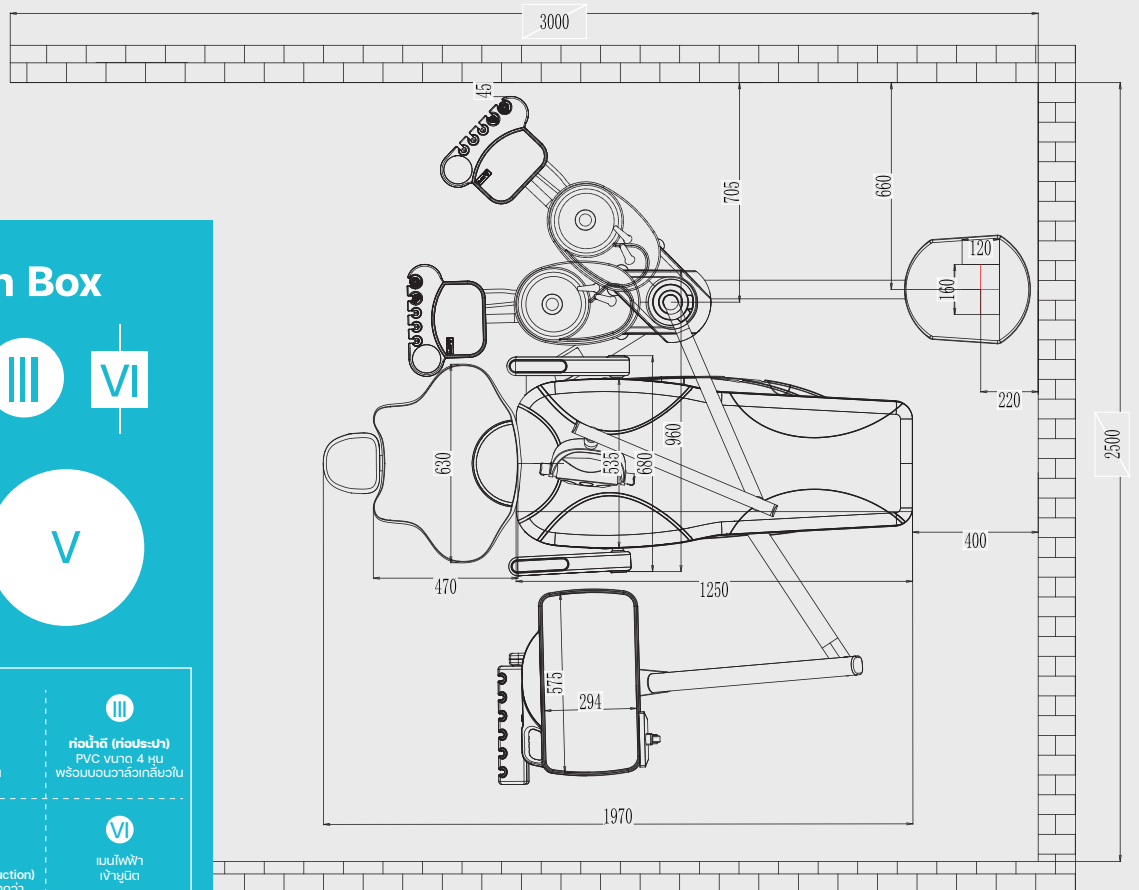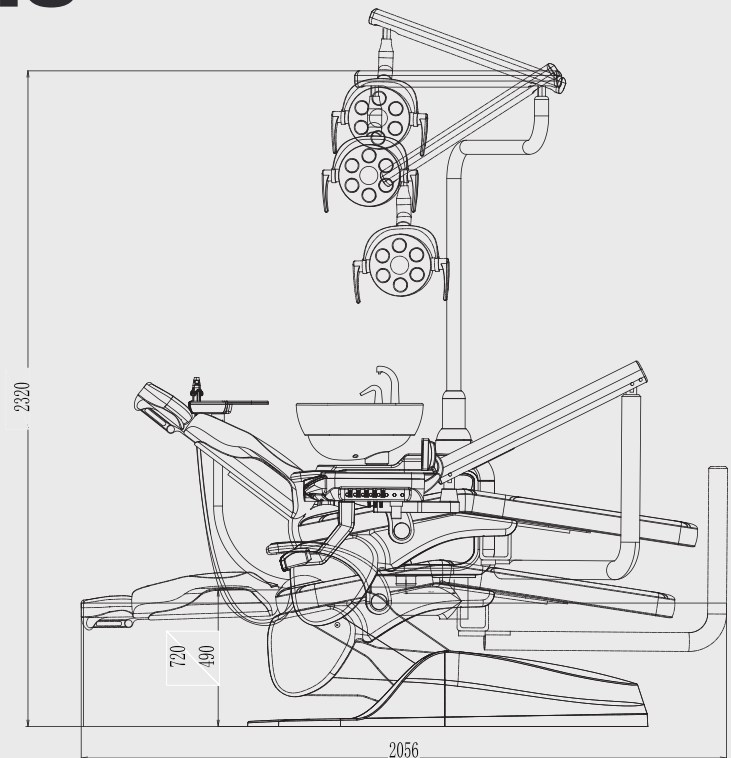

Junction Box

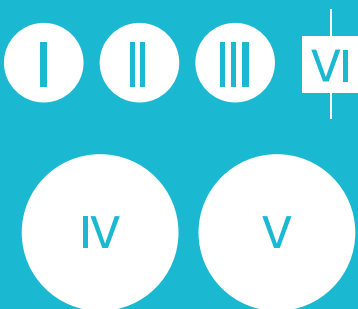

I ท่อลม PPR ขนาด 4 นิ้ว พร้อมกลองวาล์ว	II ท่ออากาศ PVC ขนาด 4 นิ้ว	III ท่อน้ำดี (ท่อประปา) PVC ขนาด 4 นิ้ว พร้อมขอบวาล์วกลองวาล์ว
IV ท่อน้ำทิ้ง (ด้านปีกวนมาก) PVC ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 นิ้วครึ่ง	V ท่อน้ำทิ้ง (เครื่องนำลม / suction) PVC ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 นิ้วครึ่ง	VI แม่เหล็กไฟฟ้า เจริญมิตร