

Italy • Safety



Premium M3



Features & Function

LED Operation Light

ระบบให้แสงสว่างแบบหลอดไฟ LED มี 8 ดวง เลือกลงแสงไฟได้ทั้งแสงสีขาวและแสงสีส้ม ควบคุมการทำงานด้วย sensor ปรับระดับความสว่างได้ 7 ระดับ




Ultra-stable Buffer System

ใช้เทคโนโลยีเกียร์มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง ในการปรับตำแหน่ง ให้จังหวะขึ้นและลงได้อย่างนุ่มนวล




Ergonomic Design

เบาะกว้างขนาดใหญ่ หุ้มด้วยหนังแท้ แบบขึ้นตะขับ พร้อมการออกแบบที่พิเศษเพื่อคนไข้ด้วย Italian waist support ช่วยให้ผู้รู้สึกสบาย

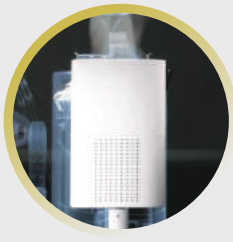

Air Purifier Treatment

ตัวกรองคาร์บอนช่วยกรองอากาศ มีอากาศสะอาดปลอดเชื้อ ด้วยเครื่องฟอกอากาศ

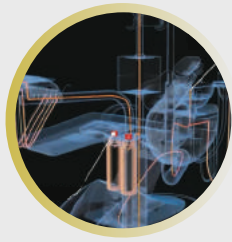

Water Disinfection

ฆ่าเชื้อน้ำประปาด้วยโอโซน ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อแบคทีเรีย ก่อนเข้าสู่เก้าอี้ทำฟัน



Dentist Tray

ถาดเครื่องมือใหญ่พิเศษ และที่วางสายสำหรับ Triple syringe, Handpiece พร้อมแผงควบคุมสั่งการ มีปุ่ม pre-set, re-set และ memory position สูงสุด 9 ตำแหน่ง



Assistant Tray

ที่วางสายสำหรับ High power suction, Saliva ejector, Triple syringe แผงควบคุมสั่งการคล้ายกับทันตแพทย์



Armrest

ออกแบบด้วย Double Armrest สามารถหมุนขึ้นและพับเก็บง่าย ช่วยลดความกังวลขณะลุกขึ้นหรือนั่งลง




Treatment box

ออกแบบให้มีความเป็นระเบียบ รวบรวมระบบแหล่งจ่ายน้ำจากขวด และสามารถปรับได้ 60° ทำให้งานที่การทำงานมีความยืดหยุ่น



Foot Control

ควบคุมการปรับระดับเบาะคนไข้ ด้านกรวย, เปิด-ปิดระบบน้ำในอ่างบ้วนปาก น้ำในแก้ว เปิด-ปิดระบบแสงไฟ

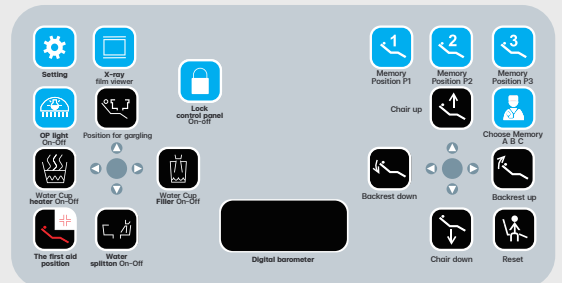

Optional

Dentist chair

ออกแบบตามหลักกายศาสตร์ (Ergonomic) ปรับขึ้นลง 450 - 610 mm ปรับองศาการอน ≥ 15°



T900 LED



Monitor arm



Cup and tissue holder



Electric motor



Dental scaler



Standard Equipment & Features

Dentist Side

- ที่วางเครื่องมือเป็นแบบแขวน Hanging hose
- ช่องวางอุปกรณ์ 6 ช่อง
- สายดูดกรอเร็ว 2 เส้น
- สายดูดกรอช้า 1 เส้น
- สาย Triple syringe 1 เส้น
- แผงควบคุมการทำงานฝั่ง Dentist Tray
- ที่ดูฟิล์มเอกซเรย์
- ตัววัดบอกความดันลม Digital barometer

Assistant Side

- แผงควบคุมการทำงานและถาดวางเครื่องมือเป็นชิ้นเดียวกัน
- ช่องวางอุปกรณ์ 5 ช่อง ที่
- สาย High power suction 1 เส้น
- สาย Saliva ejector 1 เส้น
- สาย Triple syringe 1 เส้น
- แผงควบคุมการทำงานฝั่ง Assistant Tray

Spitton Unit Body

- อ่างน้ำบ้วนปากวัสดุเซรามิก ทอฉนวนได้
- อ่างหมุนได้ 90°
- ควบคุมเปิด-ปิดน้ำ ด้วยปุ่มกด สำหรับน้ำในอ่างและน้ำในแก้ว
- มีระบบตั้งค่าปริมาณน้ำ สำหรับการเติมน้ำในแก้ว
- ที่กรองวัสดุก่อนลงท่อน้ำทิ้ง
- วอดน้ำสำหรับบรรจุน้ำกลั่นสะอาด 1 วอด

Foot Control

- ควบคุมด้านกรอและปรับตำแหน่งเก้าอี้คนไข้
- ควบคุมการทำงานของด้านกรอได้ทั้งแบบมีน้ำและไม่มีน้ำได้
- ควบคุมเปิด-ปิดน้ำในอ่างบ้วนปาก และเติมน้ำในแก้ว
- ควบคุมการเปิด-ปิดระบบแสงไฟ

Junction Box

- สวิตช์สำหรับเปิด-ปิด การทำงานของเก้าอี้ทำฟัน
- ระบบฆ่าเชื้อในน้ำประปา Ionize water treatment

Chair Driving System

- ระบบเกียร์มอเตอร์
- ตำแหน่งมาตรฐาน pre-set และ re-set
- Memory position 9 ตำแหน่ง

Vacuum System

- ระบบดูดแบบ Air suction

LED Operating Light

- สวิตช์เปิด-ปิด ปรับระดับความสว่างและปรับโหมดที่ตัวคอมไฟ
- ให้แสงสว่างได้ 2 สี Cool light และ Warm light
- ปรับระดับความสว่างได้ 7 ระดับ
- ปฏิบัติงานได้ทั้งระบบ Touchscreen และระบบ Sensor



Optional Equipment & Features

- ติดตั้งเครื่องดูดหินปูน
- ติดตั้งด้านกรอ Electric Micromotor
- จอ LCD
- เบาะหนังแท้แบบหุ้มตะเข็บ
- คอมพิวเตอร์ LED รุ่น T900

Color Guide

PU





LEATHER




Specifications

Name / Model	▶ M3
Input voltage	▶ 100 - 240 VAC
Frequency	▶ 50 Hz / 60 Hz
DC motor	▶ d.c. 24 V
Power consumption	▶ 1100 VA
Safety standard	▶ GB 9706.1-2007
Patient seat elevation system	▶ Electric gear system
Seat height	▶ Min 39 cm Max 67 cm
Weight	▶ Approximately 200 kg

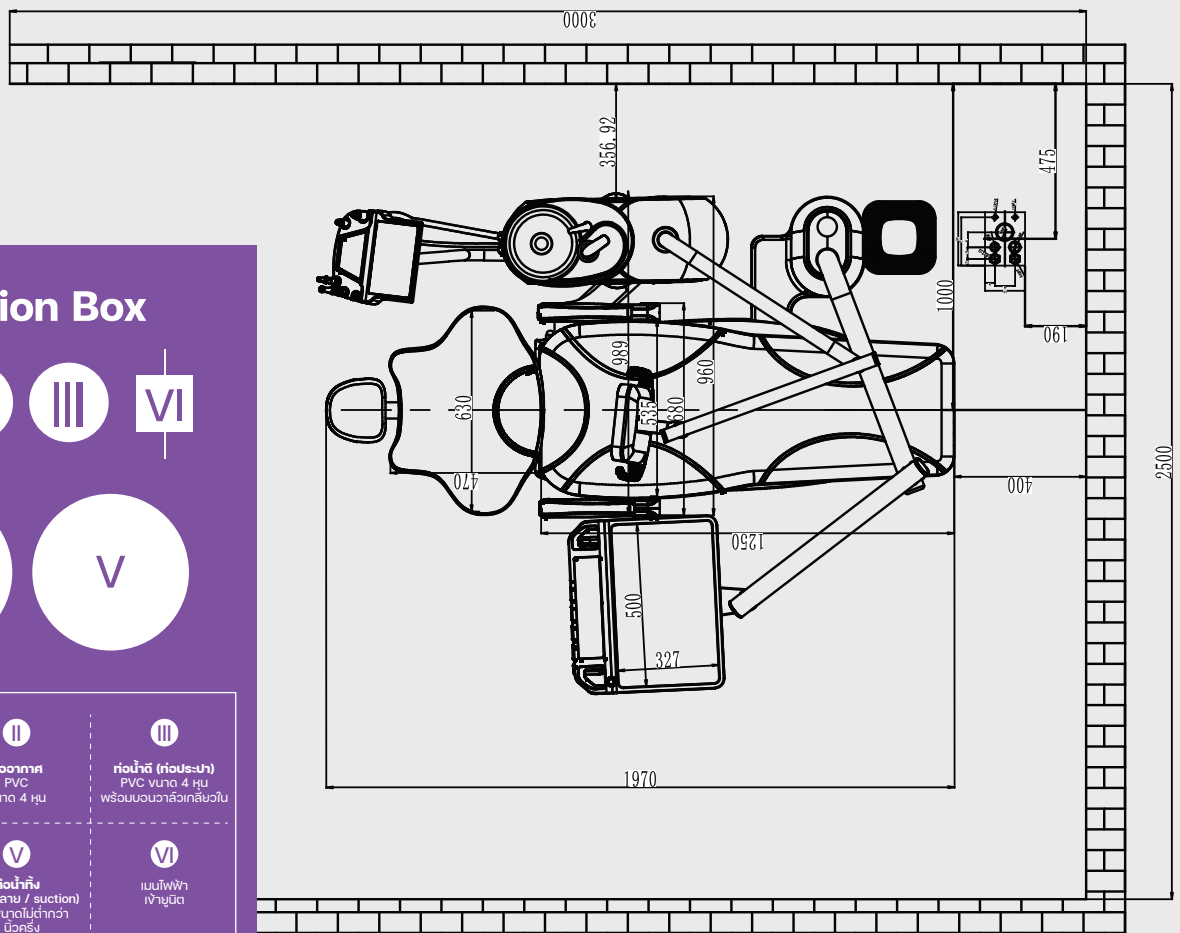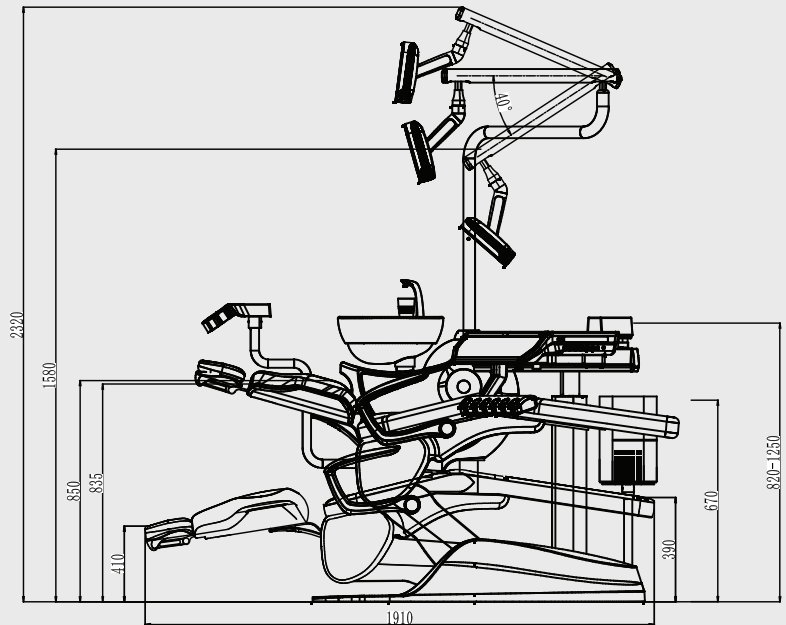

Junction Box

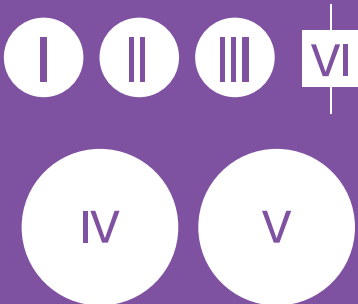

I ท่อลม PPR ขนาด 4 นิ้ว พร้อมเกลียวใน	II ท่ออากาศ PVC ขนาด 4 นิ้ว	III ท่อน้ำดี (ท่อประปา) PVC ขนาด 4 นิ้ว พร้อมขอบแนวสวิตช์เกลียวใน
IV ท่อน้ำทิ้ง (ถังล้างขนาดใหญ่) PVC ขนาดไม่เกินกว่า 1 นิ้วครึ่ง	V ท่อน้ำทิ้ง (ดูดน้ำลาย / suction) PVC ขนาดไม่เกินกว่า 1 นิ้วครึ่ง	VI แม่เหล็กไฟฟ้า เฟอร์ไรต์