

Italy • SAFETY



Luxury  
M8+





ITALY • SAFETY

# Features & Function


## Air Purifier Treatment

ตอบโจทย์ให้ห้องทันตกรรมมีอากาศสะอาด  
ปลอดเชื้อ ด้วยเครื่องฟอกอากาศ



## Full disinfection system

การฆ่าเชื้อแบบเต็มรูปแบบ ทั้งในน้ำ ในอากาศและ  
ฟังก์ชันการล้างทำความสะอาดสายอุปกรณ์ของ  
เก้าอี้ทำฟันแบบอัตโนมัติ


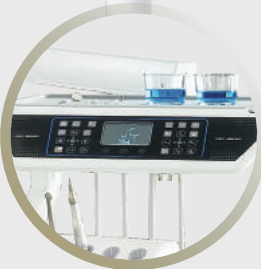


## Dentist Tray

ออกแบบถาดเครื่องมือที่มีขนาดใหญ่และแผงหน้าจอ  
ควบคุมการทำงานด้วย Tempered glass panel  
มีความแข็งแรงและทนทานต่อสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน  
พร้อมหน้าจอ LCD ที่แสดงการทำงานแบบ real-time

## Water Disinfection

แหล่งจ่ายน้ำสะอาดทั้งขวดน้ำและน้ำประปา  
ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยโอโซน ซึ่งมีประสิทธิภาพ  
ในการกำจัดเชื้อแบคทีเรีย ก่อนเข้าสู่เก้าอี้ทำฟัน

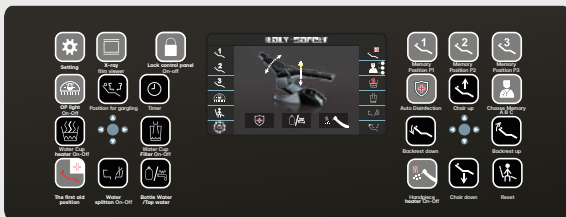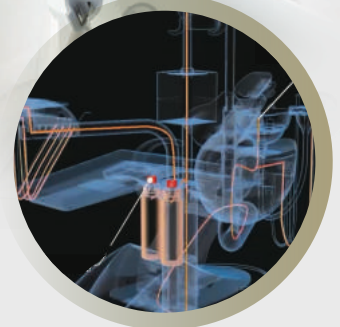

## Assistant Tray

แผงควบคุมใช้ Tempered  
glass และปุ่มสั่งการที่มีคล้าย  
กับฟังก์ชันแพทย์ ช่วยให้  
ทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น



## Treatment box

ออกแบบติดตั้งอยู่กับพื้น  
เพิ่มความแข็งแรง  
ช่วยลดการสั่นเขย่าของเก้าอี้



## Voice prompts

ระบบแจ้งเตือนด้วยเสียง เช่น  
ขั้นตอนทำความสะอาดฆ่าเชื้อ  
กดปุ่มเปลี่ยนแหล่งจ่ายน้ำหรือ  
ปริมาณน้ำในแก้วหมด



## Foot Control

ควบคุมการปรับระดับเบาะคนไข้  
ด้านกรอ, เปิด-ปิดระบบน้ำใน  
อ่างบ้วนปาก น้ำในแก้ว  
เปิด-ปิดระบบแสงไฟ



## LED Operation Light

ระบบให้แสงสว่างแบบหลอดไฟ LED  
มี 8 ดวง เลือกสีของแสงไฟได้  
ทั้งแสงสีขาวและแสงสีส้ม  
ควบคุมการทำงานด้วย sensor  
ปรับระดับความสว่างได้ 7 ระดับ



## Ultra-stable Buffer System

ใช้เทคโนโลยีเกียร์มอเตอร์ที่มี  
ประสิทธิภาพสูง ในการปรับ  
ตำแหน่ง ให้จึงหวนขึ้น และลง  
ได้อย่างนุ่มนวล



## Optional

### Dentist chair

ออกแบบตามหลักกายศาสตร์  
(Ergonomic) ปรับขึ้นลง  
450 - 610 mm  
ปรับองศาการเอน  $\geq 15^\circ$



T900 LED



Monitor arm

Cup and  
tissue holder

Electric motor



Dental scaler

## Standard Equipment & Features

### Dentist Side

- ที่วางเครื่องมือเป็นแบบแขวน Hanging hose
- ช่องวางอุปกรณ์ 6 ช่อง
- สายดูดกรอเร็ว 2 เส้น
- สายดูดกรอช้า 1 เส้น
- สาย Triple syringe 1 เส้น
- แผงควบคุมการทำงานฝั่ง Dentist Tray
- ที่ดูฟิล์มเอกซเรย์
- หน้าจอ LCD แสดงการทำงาน

### Dentist Side

- แผงควบคุมการทำงานและถาดวางเครื่องมือเป็นชิ้นเดียวกัน
- ช่องวางอุปกรณ์ 5 ช่อง ที่
- สาย High power suction 1 เส้น
- สาย Saliva ejector 1 เส้น
- สาย Triple syringe 1 เส้น
- แผงควบคุมการทำงานฝั่งผู้ช่วยของเก้าอี้ทำฟัน

### Spitton Unit Body

- อ่างน้ำบ้วนปากวัสดุเซรามิก ทอดออกได้
- อ่างหมุนได้ 90°
- ควบคุมเปิด-ปิดน้ำ ด้วยปุ่มกด สำหรับน้ำในอ่างและน้ำในแก้ว
- มีระบบตั้งค่าปริมาณน้ำ สำหรับการเติมน้ำในแก้ว
- ที่กรองวัสดุก่อนลงท่อน้ำทิ้ง
- วัสดุน้ำสำหรับบรรจุน้ำกลั่นสะอาด 1 ขวด

### LED Operating Light

- สวิตช์เปิด-ปิด ปรับระดับความสว่าง และปรับโหมดที่ตัวคอมโพ
- ให้แสงสว่างได้ 2 สี Cool light และ Warm light
- ปฏิบัติงานได้ทั้งระบบ Touchscreen และระบบ Sensor

### Foot Control

- ควบคุมด้านกรอและปรับตำแหน่งเก้าอี้คนไข้
- ควบคุมการทำงานของด้านกรอได้ทั้งแบบมีน้ำและไม่มีน้ำได้
- ควบคุมเปิด-ปิดน้ำในอ่างบ้วนปาก และเติมน้ำในแก้ว

### Junction Box

- สวิตช์สำหรับเปิด-ปิด การทำงานของเก้าอี้ทำฟัน
- ระบบฆ่าเชื้อในน้ำประปา Ionize water treatment

### Chair Driving Sytem

- ระบบเกียร์อัตโนมัติ
- ตำแหน่งมาตรฐาน pre-set และ re-set
- Memory position 9 ตำแหน่ง

### Vacuum System

- ระบบดูดแบบ Air suction



## Optional Equipment & Features

- ติดตั้งเครื่องดูดหินปูน
- ติดตั้งด้านกรอ Electric Micromotor
- จอ LCD
- เบาะหนังแท้แบบหุ้มตะเข็บ
- คอมพิวเตอร์ รุ่น T900

## Color Guide

### PU





### LEATHER



# Specifications

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>Name / Model</b>                  | ► M8+                    |
| <b>Input voltage</b>                 | ► 100 - 240 VAC          |
| <b>Frequency</b>                     | ► 50 Hz / 60 Hz          |
| <b>DC motor</b>                      | ► d.c. 24 V              |
| <b>Power consumption</b>             | ► 1100 VA                |
| <b>Safety standard</b>               | ► GB 9706.1-2007         |
| <b>Patient seat elevation system</b> | ► Electric gear system   |
| <b>Seat height</b>                   | ► Min 39 cm<br>Max 67 cm |
| <b>Weight</b>                        | ► Approximately 200 kg   |

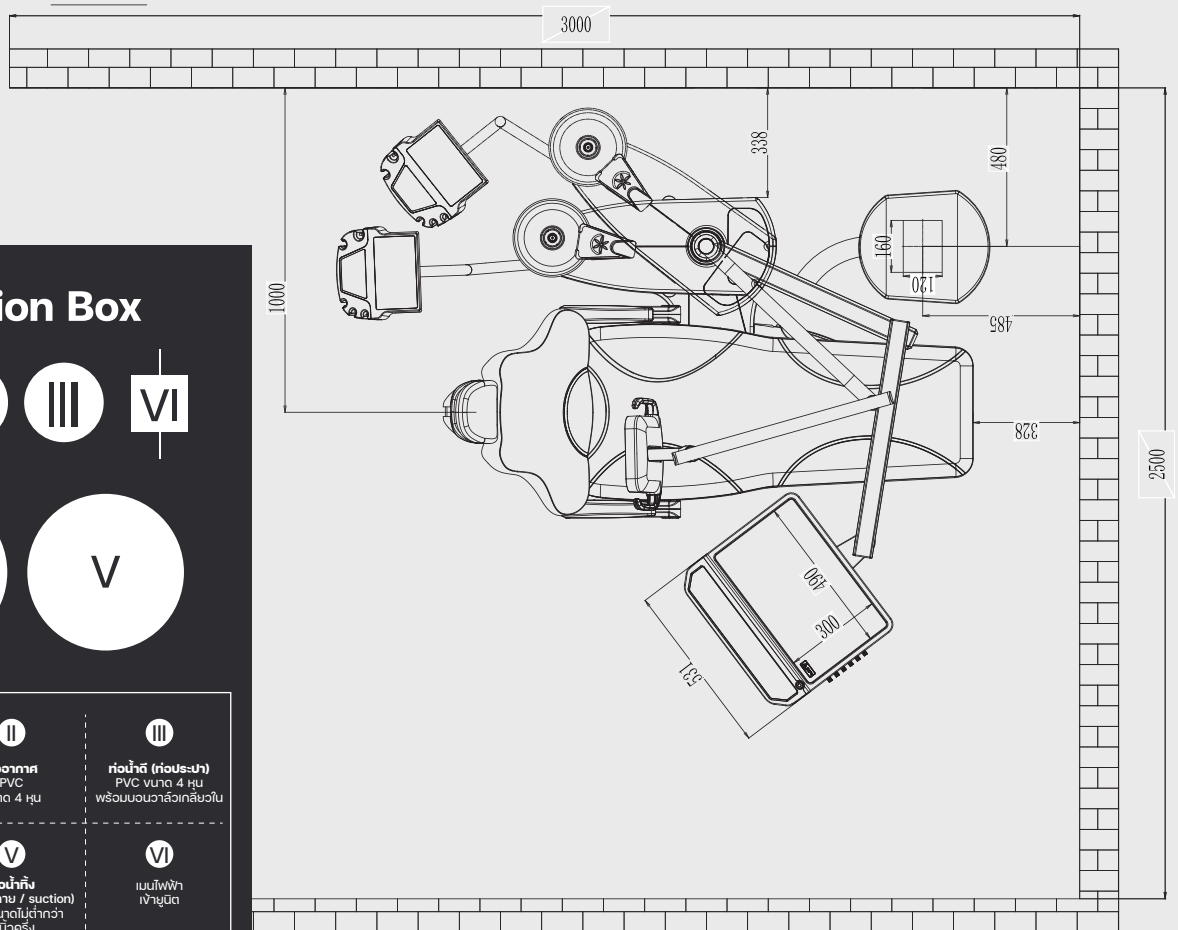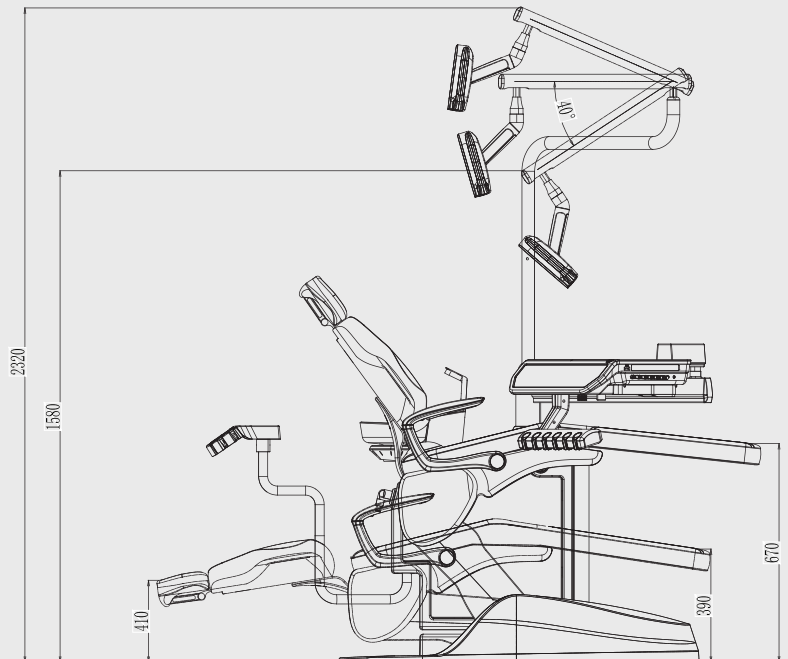

## Junction Box



|                                                                            |                                                                                        |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I</b><br>ท่อลม<br>PPR ขนาด 4 นิ้ว<br>พร้อมเกลียวใน                      | <b>II</b><br>ท่ออากาศ<br>PVC<br>ขนาด 4 นิ้ว                                            | <b>III</b><br>ท่อน้ำดี (ท่อประปา)<br>PVC ขนาด 4 นิ้ว<br>พร้อมแบบทาสีเกลียวใน |
| <b>IV</b><br>ท่อน้ำทิ้ง (ช่วงปลิวมาก)<br>PVC ขนาดไม่ต่ำกว่า<br>1 นิ้วครึ่ง | <b>V</b><br>ท่อน้ำทิ้ง<br>(เลือกน้ำลาย / suction)<br>PVC ขนาดไม่ต่ำกว่า<br>1 นิ้วครึ่ง | <b>VI</b><br>แบบไฟฟ้า<br>เข้ายูนิต์                                          |